

medicinelaser 

excel<sup>®</sup>v+



El nuevo  
poder para  
**Tratamientos  
vasculares y de  
pigmentación**

**CUTERA<sup>®</sup>**  
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

## Obtenga una ventaja

Con el aporte de diseño de los principales dermatólogos, Excel V + ofrece la potencia, la precisión y el rendimiento para tratar de forma segura y efectiva una gama más amplia de afecciones vasculares y pigmentarias.

Con dos longitudes de onda clínicamente probadas, grandes tamaños de punto de hasta 16 mm y mayor energía, Excel V + lo coloca por delante del resto y amplía sus capacidades de tratamiento en la mitad del tiempo.



### Tecnología Premium

- Dos longitudes de onda clínicamente probadas
- suministro de energía TruPulse
- Diseño de estado sólido con calibración automática.



### Experiencia mejorada

- Tratamientos totalmente personalizables.
- Interfaz intuitiva con parámetros preestablecidos.
- Refrigeración de contacto integrada superior




### Máximo ROI

- Sin consumibles ni desechables.
- 5 modos de operación únicos
- Más de 20 opciones de tratamiento únicas.

Se estima que

**415M**

personas sufren de Rosacea.<sup>1</sup>

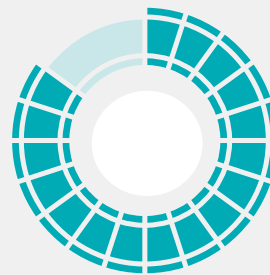

**84%**

De las personas  
Venas de Araña.<sup>2</sup>

En el Ranking de Fotorejuvenecimiento

**TOP 10**


Tratamientos no quirúrgicos 2018.<sup>4</sup>



**40%**

De las personas sufren  
problemas de  
pigmentación.<sup>3</sup>

# Potencia, precisión y rendimiento.

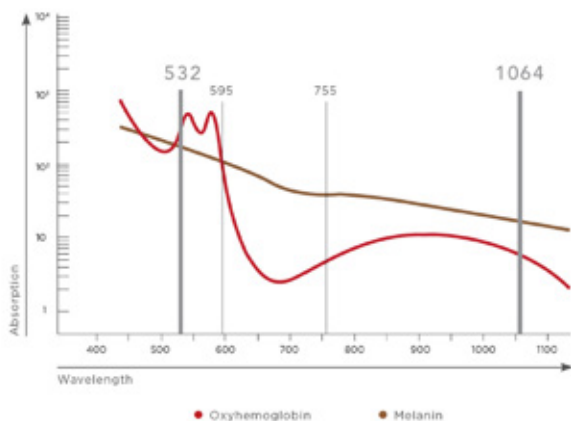

## La gama más amplia de indicaciones

- Dos longitudes de onda clínicamente probadas: 532 + 1064 nm
- Aborda lesiones vasculares superficiales + profundas, pigmento + preocupaciones de revitalización de la piel
- Alto margen de seguridad para tratamientos en todo tipo de piel.

## 50% Más Poder

- Presenta un triborato de litio reforzado con láser Óptico (LBO) + entrega TruPulse
- Gama mejorada de especificaciones
- Suministro constante de energía, rendimiento + confiabilidad


Competidor



1 excel V+



50% más de poder <sup>5</sup>

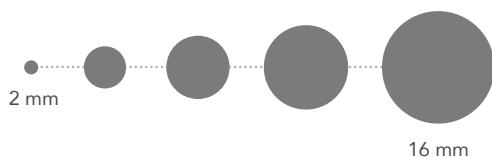

## 2X Tratamientos más rápidos

- Tamaños de punto ajustables de 1-16 mm
- El tamaño de punto más grande en su clase.
- Mayor eficacia en la práctica, rendimiento + ROI



Tip View



In-Use

## Mayor comodidad y seguridad del paciente

- Refrigeración por contacto de zafiro integrada, ajustable de 5-20 ° C
- Se enfría antes, durante y después de cada pulso
- Permite tratamientos efectivos sobre pigmento y fotodaño

# 5 razones más

## CoolView 1064 nm

Desarrollado por Cutera, Nd: YAG de 1064 nm ofrece un tratamiento efectivo, pero seguro, para lesiones vasculares más profundas y oscuras y lesiones cutáneas en todo tipo de piel.



## CoolView 532 nm

Altamente absorbida por la oxihemoglobina y la melanina, la longitud de onda de 532 nm es la longitud de onda ideal para tratar lesiones vasculares superficiales y lesiones pigmentadas que incluyen rosácea, fotodaño y telangiectasias faciales.



## Láser Genesis

Procedimiento con la firma de Cutera, la génesis láser proporciona micropulsos suaves de luz láser para apuntar a la microvasculatura en la piel y estimular la producción de colágeno para mejorar la apariencia de líneas finas, arrugas y cicatrices y lesiones pigmentadas que incluyen rosácea, fotodaño y telangiectasias faciales.

## Green Genesis

Un nuevo tratamiento micro-pulsado de 532 nm diseñado para abordar los rojos y marrones en la cara y el cuerpo, cómodamente, sin tiempo de inactividad. Combine con el tratamiento Láser Genesis para un tratamiento de revitalización de la piel no ablativo.



## 532 nm Dermastat

Un lápiz de trazado similar a un lápiz proporciona precisión y versatilidad mejoradas para tratar rápidamente pequeñas lesiones vasculares y pigmentadas en la cara y el cuerpo con facilidad.

Disponible en un tamaño de punto de 1 o 2 mm.

# excel V+ Resultados

## Rosacea



Antes



Después de 2 tratamientos

Fotos E.V. Ross, M.D.

## Manchas de la edad



Antes



Después de 2 tratamientos

Fotos K. Stankiewicz, M.D.

## Veins



Antes



Después de 1 tratamientos

Fotos H. Heise, M.D.

## Cicatrices de acné



Antes



Después de 4 tratamientos

Fotos D. Vasily, M.D.

# Especificaciones técnicas

	CoolView	
Longitud de onda	532 nm	1064 nm
Rango de fluencia	1.8 - 42 J/cm <sup>2</sup>	2 - 300 J/cm <sup>2</sup>
Duración del pulso	0.5 - 40 ms	5 - 60 ms
Tasa de rep.	0 - 4 Hz	0 - 2 Hz
Tamaño Spot	2 - 16 mm	
Enfriamiento	Contact Sapphire, Adjustable 5 - 20 °C	

	Genesis V		Dermastat	
Longitud de onda	532 nm	1064 nm	532 nm	
Rango de fluencia	0.5 - 2 J/cm <sup>2</sup>	4 - 7 J/cm <sup>2</sup>	10 - 30 J/cm <sup>2</sup>	6 - 40 J/cm <sup>2</sup>
Duración del pulso	0.5 & 1 ms	0.3 ms	0.5 - 20 ms	
Tasa de rep.	0 - 4 Hz; 10 Hz	0 - 10 Hz	0 - 4 Hz	
Tamaño Spot	8 mm		1 mm	2 mm



## Sobre Cutera

Cutera es un proveedor líder de laser y otros sistemas estéticos basados en energía para profesionales de todo el mundo. Desde 1998, Cutera ha desarrollado productos innovadores y fáciles de usar que permiten a los médicos y otros profesionales calificados ofrecer tratamientos estéticos seguros y efectivos a sus pacientes.

**medicinelaser**  
L A T A M

[www.medicinelaser.com](http://www.medicinelaser.com)



ARGENTINA  
Av. Doctor Honorio  
Pueyrredón 707, Caballito,  
CABA, Argentina.  
M: +54 9 11 3404-7158

CHILE  
Sucre 1355, Ñuñoa,  
Santiago, Chile.  
O: +56 2 2269 1981  
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR  
Av. República 1058,  
Edificio La Fontana,  
Quito, Ecuador.  
M: +593 99 120 4597

PERÚ  
Calle Almirante Lord  
Cochrane 322,  
Miraflores, Lima, Perú.  
M: +51 983 552 813

**+** OFICINAS CENTRALES

[ventas@medicinelaser.com](mailto:ventas@medicinelaser.com)

<sup>1</sup> Rosacea.org <sup>2</sup> <https://www.everydayhealth.com/skin-and-beauty/what-causes-spider-veins.aspx>

<sup>3</sup> <https://www.alliedmarketresearch.com/tattoo-removal-market> <sup>4</sup> ASAPS 2017 Statistics <sup>5</sup> Data on file